



ERGONOVA

Magic Touch PRO

Руководство пользователя

Поздравляем с приобретением перкуссионного массажера для тела Ergonova Magic Touch Pro! Вы сделали важный шаг для своего здоровья и хорошего самочувствия.

Чтобы пользоваться массажером как можно дольше, получить максимум от его функционала и избежать трудностей, пожалуйста, полностью прочитайте содержание этого руководства и при необходимости используйте его в будущем.

Ergonova - немецкий бренд массажного оборудования первоклассного качества. С 2009 года десятки тысяч людей улучшили качество своей жизни и ощутили преимущества продукции. Отличительные особенности оборудования Ergonova – надежность и долговечность, новейший современный функционал, удобство использования и стильный дизайн.

СОДЕРЖАНИЕ

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ	5
МАССАЖНЫЕ НАСАДКИ	5
НАЧАЛО РАБОТЫ	6
ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОДСВЕТКИ	6
СКОРОСТЬ	6
ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА	7
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАССАЖУ	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9

Примечание:

Цвет массажера в инструкции может отличаться от реального.

Указания по технике безопасности

Опасно! Для снижения риска поражения током, пожара и травм используйте устройство в соответствии со следующими инструкциями.

- Устройство предназначено только для использования совершеннолетними.
- Держите устройство подальше от детей или храните его в недоступных для детей местах.
- Данное устройство не является пищевым продуктом. Пожалуйста, не кладите насадки или какие-либо его части в рот.
- Используйте массажер на мягких участках тела.

Не используйте прибор для прямого массажа головы, костей и суставов.

- Не используйте массажер на следующих участках: половых органах, лице, глазах, травмированных участках, открытых ранах, ожогах, переломах.
- Используйте массажер на сухой и чистой коже поверх одежды, слегка надавливая и перемещая по телу, задействуя примерно 60 секунд на каждую область.
- В случае боли или дискомфортных ощущений, пожалуйста, немедленно прекратите использование.
- Используйте только насадки, поставляемые компанией Hi5, на соответствующие рекомендациям области тела.
- Синяки могут появиться независимо от режима массажа или приложенного давления. Проверьте массируемые участки и немедленно прекращайте использование при первых признаках боли или дискомфорта.
- Во избежание защемления, пожалуйста, держите пальцы, волосы или любые предметы подальше от пистолета и задней части насадки.
- Не помещайте никакие предметы в вентиляционные отверстия устройства.
- Тщательно проверяйте устройство и аккумулятор перед каждым использованием.
- Не разбирайте самостоятельно устройство.
- Никогда не оставляйте работающее или заряжающееся устройство без присмотра.

Меры предосторожности

- НЕ погружайте массажер в воду. Хранить его вдали от источников влажности или тепла. Не допускайте попадания в вентиляционные отверстия пыли и мусора.
- НЕ откручивайте болты и не пытайтесь разбирать устройство самостоятельно.
- НЕ используйте устройство непрерывно более одного часа. Дайте ему отдохнуть в течение 30 минут перед повторным включением.
- Отключите зарядное устройство непосредственно после зарядки или перед использованием.
- Устройство предназначено только для использования совершеннолетними. Не используйте массажер в случае получения травмы. Рекомендуется проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Противопоказания


Следующие группы лиц должны проконсультироваться с врачом перед использованием.

Беременность, диабет с осложнениями, такими как невропатия или повреждения сетчатки, наличие кардиостимуляторов, предшествующие недавние госпитализации, эпилепсия или мигрень, грыжи межпозвоночных дисков, спондилолистез, спондилолизис или спондилез, недавняя замена суставов, наличие металлических штифтов или пластин, плохое самочувствие. Использование любого перкуссионного массажера лицами с ограниченным здоровьем или детьми разрешается только в сопровождении взрослого. Вышеописанные противопоказания не запрещают вам пользоваться массажером, однако советуем сначала проконсультироваться с лечащим врачом.

В настоящее время проводятся исследования влияния перкуссионных массажеров на конкретные заболевания и симптомы. Это, вероятно, приведет в будущем к сокращению списка противопоказаний.

Практический опыт показал, что в ряде случаев использование перкуссионных массажеров в качестве дополнения к лечению носит рекомендательный характер. Конечное решение принимает врач, специалист или физиотерапевт.

Комплектация

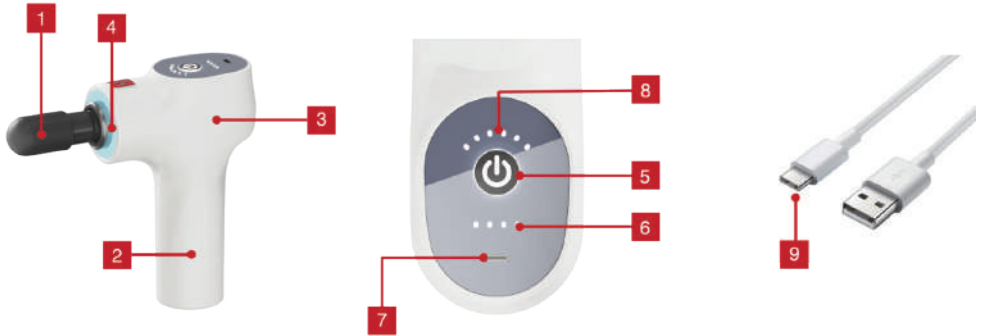

1. Насадка
2. Встроенный литий-ионный аккумулятор
3. Встроенный бесщеточный двигатель
4. Интеллектуальная подсветка
5. Переключатель питания
6. Индикатор уровня заряда батареи
7. Разъем USB-C
8. Индикатор интенсивности массажа
9. Кабель USB-C

Массажные насадки



Плоская
насадка

- Плоская насадка
Для расслабляющего
и скульптурирующего массажа.



Шарообразная
насадка

- Шарообразная насадка
Для массажа всего тела,
например, ладоней и стоп.



Пулевидная
насадка

- Пулевидная насадка
Для работы с акупунктурными
точками и глубокими мышцами.



U-образная
насадка

- U-образная насадка
Для массажа шеи,
плеч и сухожилий.

Начало работы

- Включение питания: Нажмите кнопку питания в течение 1,5 секунд для включения массажера. По умолчанию выставлена первая скорость, и интеллектуальная подсветка будет включена по умолчанию.
- Выключение питания: Когда устройство находится в режиме работы/паузы, нажмите кнопку питания в течение 2 секунд для выключения устройства; Если устройство находится в режиме паузы, белый индикатор начнет мигать за 30 секунд до полного отключения.
- Для изменения скорости кратко нажимайте на кнопку питания. Каждое нажатие меняет скорость на 1 шаг до 6-го уровня.
- Когда устройство находится в режиме работы/ожидания, коротко нажмите на кнопку питания, чтобы запустить массажер на 1-й скорости .
- Нажатие кнопки питания после 6-го уровня переведет устройство в режим паузы. Если вы хотите остановить массаж на 1-6 уровне, нажмите кнопку питания в течение 2 секунд. Устройство автоматически выключится через 20 минут.
- Состояние работы указывает на то, что устройство массирует или вибрирует.
- Состояние паузы указывает на то, что устройство включено, но остается неподвижным.
- Зарядка: Устройство можно заряжать при любом уровне мощности, но невозможно включить во время зарядки. Если во время работы внезапно произойдет сбой, устройство автоматически выключится.
- Если устройство в режиме паузы подключить к зарядке, оно автоматически выключится.
- Когда устройство выключено, плотно вставьте желаемую насадку.
- В зависимости от мышечной массы и желания массируемого, можно самостоятельно давление вибрации в соответствии с комфортным уровнем.

Значение цветов интеллектуальной подсветки



- Белый: режим паузы, зарядка аккумулятора
- Розовый: 1-я скорость
- Небесно-голубой: 2-я скорость
- Оранжевый: 3-я скорость
- Синий: 4-я скорость
- Фиолетовый: 5-я скорость
- Коралловый: 6-я скорость

Скорость

- | | |
|--|---|
| Уровень 1 - 1600 об/мин (розовая подсветка) | Уровень 2 - 2000 об/мин (небесно-голубая) |
| Уровень 3 - 2400 об/мин (оранжевая подсветка) | Уровень 4 - 2800 об/мин (синяя) |
| Уровень 5 - 3200 об/мин (коралловая подсветка) | Уровень 6 - 1600-3200 об/Мин (фиолето- |

Зарядка устройства

- Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течении не менее шести часов.
- Во время зарядки индикаторы уровня заряда батареи будут показывать текущую фазу зарядки.
- Мерцание первого индикатора означает, что устройство заряжено на 0%-10%; Мерцание второго индикатора означает, что устройство заряжено на 11% - 40%; Мерцание третьего индикатора означает, что устройство заряжено на 41% - 70%; Мерцание четвертого индикатора означает, что устройство заряжено на 71% - 99%. Если все индикаторы горят одновременно - аккумулятор полностью заряжен.
- Для зарядки выберите обычный адаптер типа 5V.1-2A. Соедините кабель питания USB-C (из комплекта поставки) с одной стороны с разъемом в пистолете и с адаптером питания с другой стороны. Вставьте соединение в розетку.
- Аккумулятор можно заряжать в любое время и при любом уровне заряда батареи.
- По соображениям безопасности во время зарядки вы не сможете включить массажер.
- Среднее время работы составляет 4-6 часов в зависимости от уровня скорости и прилагаемого давления.

Входные данные: 5V \neq 1-2A (пожалуйста, используйте обычный адаптер для зарядки мобильного телефона 5V \neq 1-2A для зарядки устройства)

Время работы : 9 часов (без нагрузки), 4-6 часов (в зависимости от уровня скорости и прилагаемой силы)

Утилизация аккумулятора






Перед утилизацией устройства, пожалуйста, с помощью подходящего инструмента откройте металлическую часть внизу пистолета и выньте находящийся внутри аккумулятор для утилизации (пользователь не может менять аккумулятор самостоятельно):


- Перед утилизацией устройства необходимо извлечь аккумулятор из устройства.
- При извлечении аккумулятора убедитесь, что устройство выключено.
- Аккумулятор следует утилизировать в соответствии с национальными правилами по утилизации и классификацией опасных отходов.

Массаж спины


Для массажа спины необходимо расположить человека на удобном массажном столе или мягкой плоской поверхности.

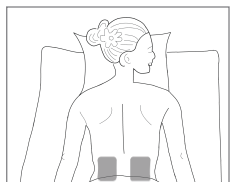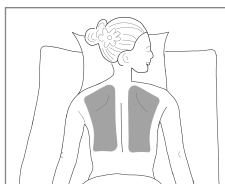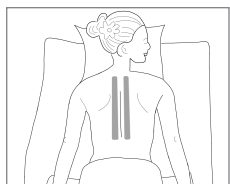


Массаж шеи

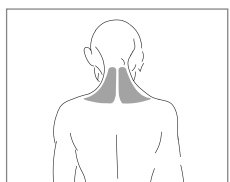


Массаж рук

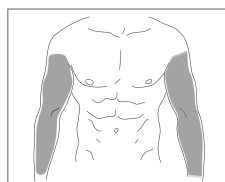



Массаж ног

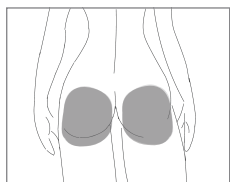

Массаж ладоней

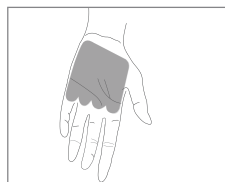

Массаж ступней

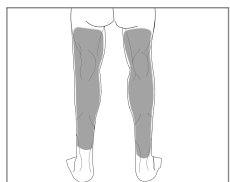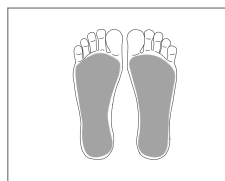

Технические характеристики

Наименование: перкуссионный массажер

Модель: Magic Touch Pro

Входное напряжение: 5V $\overleftarrow{=}$ 2A

Время работы: 9 часов без нагрузки; 4-6 часов в зависимости от уровня скорости и прилагаемой силы

Вес: 0,542кг

Размер: 1166 x122.5 x 57 мм

тел. 8-800-700-14-29

www.ergonova.ru

info@ergonova.ru

Полный перечень представительств: <http://ergonova.ru/stores/>

Все авторские права на тексты и изображения принадлежат Ergonova GmbH и могут использоваться только с согласия правообладателя.

Авторское право © 2012г.

Ergonova GmbH

Все права защищены



Производитель:

SHANGHAI MEDICINES & HEALTH PRODUCTS IMPORT & EXPORT CO., LTD

Adress: No. 158 Hanzhong Road SHANGHAI, CHINA

Дата производства: смотрите на упаковке.

Сделано в Китае



Designed by Ergonova Germany
www.ergonova.ru

